

New

xanos[®]
EVO BLANK



Xanos[®] Evo Blank ZI-ONE+ ML



Unisce le sue straordinarie caratteristiche fisiche con l'eccezionale traslucenza del 47%. In questo modo è il Blank per chi vuole usare solo il meglio per la propria clientela, tenendo sotto controllo i costi di magazzino.


Xanos® Evo Blank ZI-ONE+ ML multilayer

I DISCHI


XANOS® Zirconia ZI-ONE+ ML sono stati sviluppati da Dentag Italia per unire le necessità estetiche a quelle fisiche e in questo modo mettere a disposizione della propria clientela un Blank che soddisfa tutte le diverse esigenze nel laboratorio odontotecnico. Questo Blank riduce notevolmente i costi di magazzino e soddisfa il clinico per le sue eccellenti caratteristiche estetiche garantendo ottime caratteristiche fisiche a garanzia dei propri pazienti.



RESISTENZA ALLA FLESSIONE (MPa)

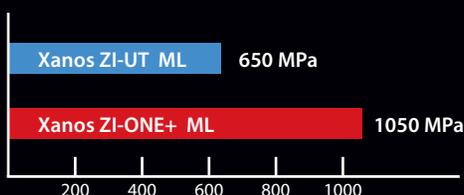

TRASLUCENZA

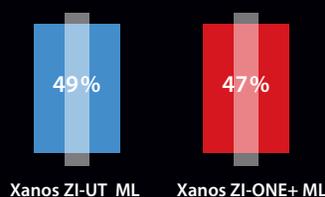


SINTERIZZAZIONE

Xanos ZI-UT ML	1430 – 1470° C consigliato 1450° C
Xanos ZI-ONE+ ML	1450 – 1500° C consigliato 1480° C

I VANTAGGI

- Traslucenza 47%
- Resistenza alla flessione 1050 MPa
- Nella colorazione vita in Multistrato

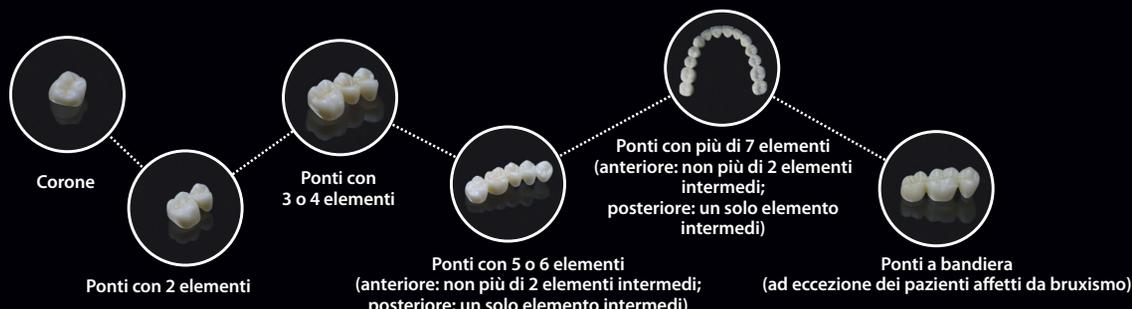

IL PROCESSO DI PRODUZIONE VIENE RIDOTTO CON XANOS® EVO BLANK ZI-ONE+ ML



Lavorazione CAM



Colorazione




Asciugatura



Sinterizzazione

SINTERIZZAZIONE 1.480° C

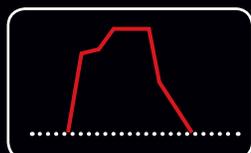

DETTAGLI TECNICI:

- Dischi presinterizzati
- Diametro: 98 mm + 95 mm + AG 71 mm
- Altezza: 12 – 14 – 16 – 18 – 20 – 25 mm
- Resistenza alla flessione: 1050 MPa

DENTAG ITALIA SRL

Via della Miniera 9 | 39018 Terlano (BZ) Italy | Tel. +39 0471 256 233 | Fax +39 0471 256 244
info@dentag-italia.com | www.dentag-italia.com