

xanos[®]
EVO BLANK



Xanos[®] Evo Blank ZI-UT ML



Xanos[®] Evo Blank ZI-UT multilayer.
Massima traslucenza per lavori monolitici
di altissima estetica. Indicati per corone
singole e ponti fino a tre elementi.

Xanos® Evo Blank ZI-UT ML multilayer


I DISCHI

Xanos® Zirconia ZI-UT multilayer: zirconia ultra trasparente multilayer sviluppati da Dentag Italia srl aprono nuovi orizzonti rispetto al tradizionale mondo della zirconia. Con la loro eccezionale trasparenza e l'eccellente estetica ottenuta grazie alle quattro sfumature multilayer sono indicati per tutti i lavori dove è richiesto il massimo del risultato. Inoltre soddisfano le più esigenti tecniche di terapia nella moderna odontoiatria CAD-CAM.

ZIRCONIA ZI-UT ML

XANOS® Evo Blank ZI-UT multilayer comporta una minore preparazione del dente ed è disponibile in 4 strati combinati in 12 sfumature cromatiche.

Nessuna necessità di colorazione.

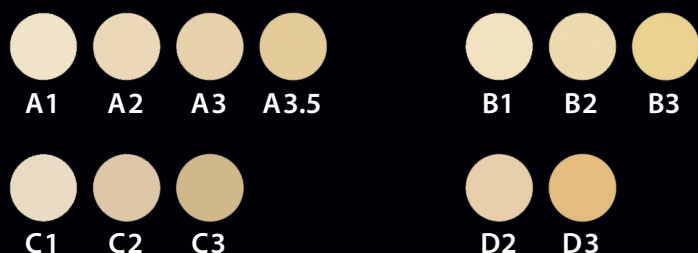

Il nostro XANOS® Evo Blank ZI-UT multilayer è indicato, grazie al massimo livello di trasparenza, per restauri anteriori di corone – faccette – ponti fino a 3 elementi. I quattro strati nelle diverse tonalità di base garantiscono un'eccellente estetica e una naturale luminosità.


I VANTAGGI

Xanos® zirconia ZI-UT multilayer è un disco in zirconia con variazioni di colore e trasparenza. Con l'utilizzo di questi dischi otteniamo restauri monolitici dall'aspetto estremamente naturale. Senza ulteriori passaggi manuali (quali: immersione, colorazione, asciugatura ecc.) si passa direttamente al processo di sinterizzazione.


INDICAZIONI

- corone
- faccette
- ponti fino a 3 elementi


IL PROCESSO DI PRODUZIONE VIENE RIDOTTO CON XANOS® EVO BLANK ZI-UT ML

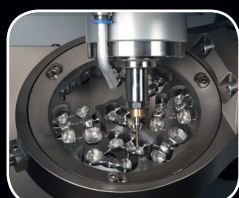

Lavorazione CAM

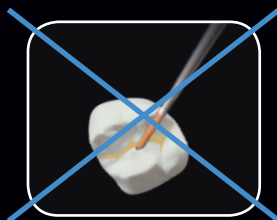

Colorazione

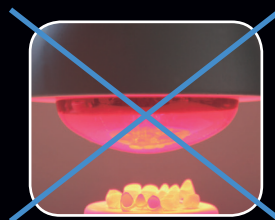


Asciugatura



Sinterizzazione

SINTERIZZAZIONE 1.450° C

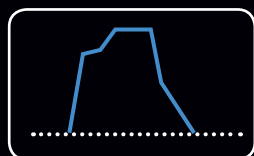

DETTAGLI TECNICI:

- Dischi presinterizzati
- Diametro 98 mm: altezze 14 – 16 – 18 – 20 mm
- Diametro AG 71 mm: altezze 14 – 16 – 18 mm
- Resistenza alla flessione: 650 MPa

DENTAG ITALIA SRL

Via della Miniera 9 | 39018 Terlano (BZ) Italy | Tel. +39 0471 256 233 | Fax +39 0471 256 244
info@dentag-italia.com | www.dentag-italia.com